

# âme pure®

## The Original CIT Face Roller



### (Dansk)

Vi anbefaler at bruge *âme pure*® CIT Face Roller i kombination med Collagen Therapy Gel eller Wrinkle Eraser Gel for at opnå et optimalt resultat. I ansigt bør man ikke bruge nåle over 0,75mm.

Det er også vigtigt at undgå en roller med for mange nåle. Vi anbefaler en roller med 192 nåle af kirurgisk rustfrit stål i henhold til klinisk dokumenterede undersøgelser for et optimalt resultat.

Der vil opstå lidt rødme efter behandlingen, som for de fleste vil være væk dagen efter.

Skulle rødmen vedvare, ruller du mindre næste gang og påfører mere Gel.

Vi anbefaler en kur på 2 måneder med *âme pure*® CIT Face Roller og Collagen Therapy Gel eller Wrinkle Eraser Gel.

**Lad det gå 1-2 dage mellem hver behandling.**

**Hver behandling skulle ikke vare mere end maks. 5 minutter.**

**Behandling med CIT Face Roller gøres om aftenen 2-4 dage hver anden uge i 2 måneder.**

**Du har 1 uge med behandlingen og 1 uge pause.**

**F.eks. søndag, tirsdag, torsdag og lørdag. Derefter 1 uges pause fra rullingen.**

**Hvis du har en følsom hud, kan du lade det gå flere dage mellem behandlinger. F.eks.**

**søndag, onsdag og lørdag.**

**Ikke gør behandlingen 2 dage i træk for huden har brug for tid til at komme sig.**


Hvis resultatet ikke er optimalt efter 2 måneder, kan du tage 3-4 ugers pause og starte op en ny 2 måneders behandling. Husk at CIT Face Roller skal skiftes efter 2 måneders behandling (*ca. 16 ganges brug*), for nålene bliver sløve efter en tid, og dette kan gøre behandlingen smertefuld.

Sløve nåle kan også føre til hudirritation på behandlingsområdet.

- Enkel behandling af linjer, rynker, forstørrede porer, fedtet hud, løs hud, ar og ar efter akne.
- Øger kollagen produktion i din hud med op til 10 gange efter kun én behandling.
- De aktive ingredienser i hudplejeprodukter kan absorberes i din hud med op til 1000 gange bedre.
- Giver ny og sundere hud
- Bremser hudens aldring
- Stimulerer hudcellerne til at forynge sig
- Ikke testet på dyr
- Ingen parabener

## Fremgangsmåde

1. Rens huden grundigt med en blid ansigtsvask. Desinficér området, som skal behandles med *âme pure*® Sanitizer spray. Lad huden tørre helt før behandling med CIT Face Roller.
2. Desinficér CIT Face Roller nåle med *âme pure*® Sanitizer spray og lad den tørre helt før du starter med at rulle.
3. Rul CIT Face Roller på et og et område ad gangen med et let til medium pres. Du skal **ikke** presse hårdt.
4. Hvert hudparti rulles ca.: frem og tilbage tælles som *1 gang*
  - 5 gange vandret
  - 5 gange lodret
  - 5 gange diagonalt til højre
  - 5 gange diagonalt til venstre

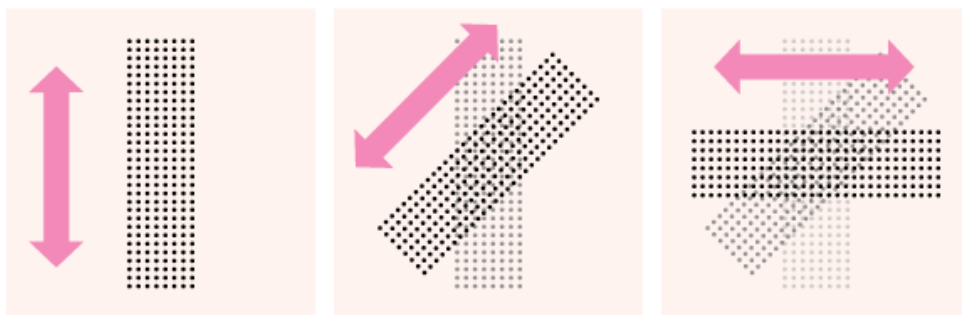

Påfør *âme pure*® Collagen Therapy Gel / Wrinkle Eraser Gel straks efter du har rullet hvert hudparti. Det er meget vigtigt at den bliver påført inden 10 minutter efter rulling, da huden vil være helt lukket efter 10 minutter.

**Ingen** andre cremer skal påføres den aften du gør behandlingen, kun Collagen Therapy Gel / Wrinkle Eraser Gel.

5. For at undgå infektioner skyl nålehovedet i varmt vand fra hanen og desinficér den før og efter brug med *âme pure*® Sanitizer Spray.
6. *âme pure*® CIT Face Roller skal bruges kun af dig og ingen andre. Opbevar CIT Face Roller i medfølgende etui.

Påfør gerne *âme pure*® Collagen Therapy Gel / Wrinkle Eraser Gel op til 2-5 gange på det behandlede område i løbet af aftenen, hvis huden føles varm og rød.

Undgå sminke og andre cremer **10 timer** efter behandling.

**Brug gerne *âme pure*® Duo Multiplex eller Wrinkle Eraser fugtighedscreme 10 timer efter CIT Face Roller Behandling**, gerne morgen og aften. Det er vigtigt at huske at **ingen** andre produkter end Collagen Therapy **Gel**/ Wrinkle Eraser **Gel** skal påføres behandlingsaften.

Vi anbefaler kun at bruge *âme pure* kosmetiske formuleringer og Sanitizer Spray i kombination med vores CIT Face Roller for at undgå negative bivirkninger.

Undgå at sole dig i solen mindst 24 timer før og efter CIT Roller behandling.

Hvis du skal sole dig eller bare være ud i dagslys, bør du altid bruge solfaktor minimum 40, som beskytter mod dagslys og UVstråler i behandlingsperioden og gerne 4 uger efter afsluttet CIT Roller behandling. Det er nødvendigt for at undgå hyperpigmentering i behandlingsområdet. Solariet (kunstig sol) og spraytan bør undgås i behandlingsperioden.

#### **Rengøring af *âme pure*® CIT Roller:**

Skyl CIT Face Roller i varmt vand og undgå at skade nålene.

Desinficér CIT Face Roller med Sanitizer Spray og lad den lufttørre, og læg den tilbage i medfølgende etui.

Hold etuiet rent ved hjælp af varmt vand.

#### **Forsigtighed**

Bør ikke bruges, hvis du er allergisk mod kirurgisk rustfrit stål.

CIT Roller skal kun bruges af dig og skal **ikke** deles med andre.

Undgå at rulle lige under øjne, på øjenlåg og læber.

Har du taget botox eller fillers skal du vente 6 uger efter indsprøjtning.

CIT Roller skal ikke bruges på bumser, akne læsioner, nodulocystic acne/ indvendige bumser, aktivt herpesudbrud eller en anden form for akut infektion eller betændelse i huden.

CIT Roller skal ikke bruges på keloid og hypertrofisk ardannelse (overvækst af arvæv, der udvikler omkring et sår, hævet over huden).

CIT Roller skal ikke bruges på hævet modermærker eller vorter.

CIT Roller skal ikke bruges på eksem, rosacea, psoriasis og solkeratose.

CIT Roller skal ikke bruges sammen med antibiotika, eksfolierende produkter eller produkter, som indeholder AHA/BHA syrer, glycolsyre, salicylsyre, benzoyl peroxide, MI (Methylisothiazolinone).

Skal ikke bruges hvis du har brugt Isotretinoin/Roaccutane de sidste 6-12 måneder.

Skal ikke bruges i det område, hvor strålebehandling/ laserbehandling er blevet udført de sidste 12 måneder.

Undgå at sole dig i solen mindst 24 timer før og efter CIT Roller behandling.

Solariet skal undgås helt under behandlingen. Du bør vente 4 uger efter afsluttet behandling med at besøge solariet.

Ikke brug CIT Roller, hvis du lider af hæmofili eller diabetes.

Undgå motion, der forårsager svedtendens, sauna eller dampbad, hvis du oplever hudirritation.

Anbefales ikke til brug af personer under 18 år.

Ikke brug CIT Roller på børn eller dyr! Skal opbevares utilgængeligt for børn!

*\*Hvis der skulle opstå ubehag ved brug af CIT Roller, skal du straks besøge din læge.*